

# ICON 35

Rullstol typ *light & compact*  
Bruksanvisning (SE)



ICON 35Bx



ICON 35Lx



**more than mobility**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1 Allmän information**
- 2 Användning, rekommendationer och kontraindikationer**
- 3 Säkerhetsanmärkningar och rekommendationer**
- 4 Generell produktbeskrivning**
- 5 Etikett**
- 6 Användning**
- 7 Rengöring och desinficering**
- 8 Underhåll och service**
- 9 Transport och förvaring**
- 10 Återanvändning**
- 11 Garanti**
- 12 Tekniska uppgifter**
- 13 Konfiguration och användning av rullstolen**
  - 13.1 Introduktion till ICON 35**
    - 13.1.1 ICON 35Bx**
    - 13.1.2 ICON 35Lx**
  - 13.2 Generellt**
    - 13.2.1 Hjul**
    - 13.2.2 Bromsar**
    - 13.2.3 Fotstöd**
    - 13.2.4 Armstöd**
    - 13.2.5 Stödmekanismen som fälls ihop i hälften**
- 14 Tillbehör**
  - 14.1 Säte och ryggstöd med högsta komfort**
    - 14.1.1 Bälten för justering av sätets spänning**
    - 14.1.2 Bakre bälten för spänningsjustering**
    - 14.1.3 Beklätt säte och stöd**
  - 14.2 Vältskydd**
    - 14.2.1 Vältskydd (gungskydd) - montage på vänster sida (vy bakifrån)**
    - 14.2.2 Vältskydd (slirskydd) - montage på vänster sida (vy bakifrån)**

## 1. Allmän information

*Bästa kund,*

Tack för att du valt **ICON 35** rullstolen.

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av den medicinska utrustningen och tips på hur den kan användas på ett korrekt och säkert sätt. Vänligen läs igenom denna bruksanvisning. Ta del av och följ säkerhetskraven.

**REHASENSE®** jobbar kontinuerligt på att förbättra sina produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och produktens funktioner utan varsel.

Rullstolen **ICON 35** är inte avsedd för att sitta på för Användaren i fordon som är i rörelse (t.ex. personbilar, bussar, tåg, tunnelbana osv.). Mer detaljerad information finns i kapitlet "Transportrekommendationer".

Vid eventuella frågor vänligen kontakta försäljaren eller **REHASENSE®** direkt. Kontaktuppgifterna finns på bruksanvisningens sista sida.

## 2. Användning, rekommendationer och kontraindikationer

Ändamål: Den manuella rullstolen är en medicinsk utrustning avsedd för personer med begränsad rörelseförmåga som inte kan stå, gå och/eller sätta sig själva. Den är avsedd för att transportera dessa personer i sittande ställning. Användare kan förflytta sig med rullstolen (när den är utrustad med stora bakhjul eller drivhjulsramar) på egen hand eller med någons hjälp. Rullstolen kan användas inomhus och utomhus på olika ytor (asfalt, betong, sten och grus) vid goda väderförhållanden. Rullstolen får inte användas på något annat sätt.

Rekommendationer: Utrustningen är i synnerhet avsedd för personer som (på grund av olika hälsobesvär) inte kan stå och/eller gå och behöver därför en transportutrustning som hjälper dem att utföra vissa eller alla vardagsaktiviteter.

Kontraindikationer: Denna typ av rullstol kan inte användas av personer med pares eller andra sjukdomar som kan orsaka allvarliga problem med kroppskontroll. Dessa personer behöver specialutformade rullstolar som ger Användaren extra stöd. Huruvida någon behöver och kan använda **ICON 35**-rullstolen bör alltid konsulteras med en läkare eller en sjukgymnast. Den manuella rullstolen är en medicinsk utrustning avsedd för personer med begränsad rörelseförmåga som inte kan stå, gå och/eller sätta sig själva. Den är avsedd för att transportera dessa personer i sittande ställning.

## 3. Säkerhetsanmärkningar och rekommendationer

### Säkerhets- och kvalitetsnormer


**ICON 35**-rullstolen har genomgått alla nödvändiga tester och uppfyller följande europeiska normer:

PN-EN 12182:2005; PN-EN 12183:2010; PN-EN 1021-1:2007; PN-ISO 7176-1,3,5,7,8,15.

Den är CE-märkt och uppfyller kraven i förordningen 2017/745. Om rullstolen används på rätt sätt, kommer den att hålla i flera år.

- Rullstolen **ICON 35** får inte belastas med över 125 kg.
- Utrustningen får inte användas i godkända transportmedel.
- Kontrollera att bruksanvisningen har lästs av alla personer som använder utrustningen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppkommit till följd av att denna bruksanvisning inte beaktats.
- Produkten får endast användas om den är i gott tekniskt skick.
- Utrustningen får endast användas för sitt ändamål.
- Gör inga konstruktionsändringar i utrustningen såvida du inte har tillverkarens skriftliga samtycke.
- När Användaren gör nödvändiga justeringar ska han eller hon se till att inte klämma fingrarna eller andra kroppsdelar klämda mellan två rörliga delar av utrustningen.
- Vid användning ska alla hjulen på utrustningen ALLTID vara i kontakt med ytan. På så sätt blir den stabil och olyckor kan undvikas.
- När du använder rullstolen i stationär ställning, MÅSTE handbromsarna vara låsta
- Har det upptäckts defekter eller fel, ska du inte använda rullstolen och kontakta försäljaren omedelbart,
- Denna bruksanvisning och VARNINGAR som finns på alla etiketter ska beaktas.
- Anordningen får endast användas på stabil yta.
- Undvik brännskador orsakade av direkt solljus vid användning. Produktens olika delar kan bli varma.
- Rullstolen bör inte användas på sand, i sörja eller vid extrema väderförhållanden.
- Den som bistar rullstolens Användare bör vara i god form.
- Ta inte bort några delar av eller tillhör till rullstolen på egen hand. Detta kan påverka produktens stabilitet och göra den oanvändbar.
- Rullstolen bör inte placeras i närheten av värme- eller eldkällor (eldstäder, ugnar, element, spisar). Det rekommenderas inte att man röker när man sitter på rullstolen då den inte är eldfast.
- VID ALLVARLIGA OLYCKOR I SAMBAND MED UTRUSTNINGEN, VÄNLIGEN KONTAKTA FÖRSÄLJAREN ELLER REHASENSE DIREKT (kontaktuppgifterna finns i slutet av bruksanvisningen). Det är viktigt att genast vidta åtgärder enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.

## WARNING!

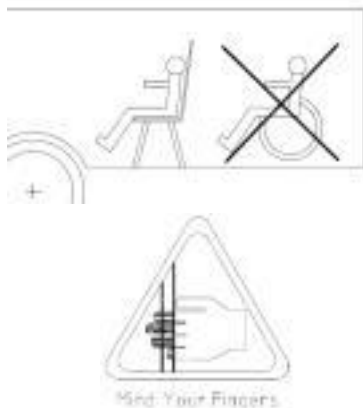

Rullstolen bör inte användas som sittplats för Användaren i fordon i rörelse (som t.ex. bussar, tåg, tunnelbana, flygplan o.d.). Det är förbjudet att sitta i rullstolen i fordon i rörelse. Vid transport ska rullstolen parkeras och säkras. Rullstolsanvändaren bör transporteras på ett säkert sätt och sättas på ett säte i fordonet. Annars finns det en stor risk för olyckor och egendomsskador.

Rullstolen är utrustad med flera rörliga element, fåror, hål mellan olika delar. Det föreligger en klämrisk vid hopsättning, uppfällning och justering av olika element. Detta gäller i synnerhet fingrar och händer. Det finns även en risk för att skada fingrarna på rörliga element. Beakta alltid säkerhetsreglerna vid justering och konfiguration av rullstolen för att eliminera risken för klämskador.

## 4. Generell produktbeskrivning

ICON 35-rullstolen har flera olika element: parkeringsbromsar, nedmonterbara fotstöd med justerbar höjd, nedmonterbara armbågsstöd med justerbar höjd (endast i LX-versionen). Den är dessutom utrustad med bakhjul, främre vändbara styrhjul och en dubbelram med korsförstärkning. Anordningen är tillverkad av pulvermålade aluminiumrör. Den är väl rostskyddad. För vissa justeringar behövs standardverktyg som finns tillgängliga i alla verktygsbutiker.

Med sin tåliga korsram säkerställer rullstolen bekväm transport och förvaring, manövrerbarhet. Det är dessutom lätt att flytta användaren till och från rullstolen.

Rullstolar levereras i förpackning och är uppdelade i ett par element för att underlätta transport.

Rullstolsuppsättningen består av följande element:

- 1 korsram med klädsel, 2 bromsar, 2 armstöd, 2 bakhjul och 2 främre styrhjul;
- 2 nedmonterbara fotstöd;
- 1 bruksanvisning

Vilka extra tillbehör som medföljer beror på beställningen.

### Huvuddelar:



Bilden ovan visar ett exempel på en rullstol med alla standardkomponenter och dess placering. Din rullstol, dess egenskaper kan skilja sig från vad som visas ovan (beroende på beställningen), men namnet, funktionerna och placeringen blir desamma.

## Alternativ utrustning


Beroende på version och beställning kan rullstolen utrustas med olika typer av hjul, trumbromsar, enkel eller dubbel korsram, lyftbara fotstöd, stöd för personer som genomgått amputationer, stöd för personer med hemiplegi, vältsäkra hjul, nackstöd, sidostöd, säkerhetsbälten, säten, beklätt ryggstöd med justerbar spänning, hopfällbart ryggstöd, skjuthandtag med justerbar höjd, stabiliserande korsram, bord, paraply, infusionshandtag, kryckhandtag.

## Montage av rullstolen:


Det rekommenderas att rullstolen monteras och ställs in av en specialist innan den levereras till Slut användaren.

- Ta ut alla rullstolselement ur kartongen och kontrollera om alla komponenter som finns i beställningsspecifikationen har levererats. Om du upptäcker att något saknas eller att någon del är skadad, avbryt montaget och kontakta försäljaren.
- Hopfällbara komponenter såsom bakhjul, fotstöd och extra utrustning ska monteras i enlighet med bruksanvisningen.

## Att fälla upp och ned rullstolen

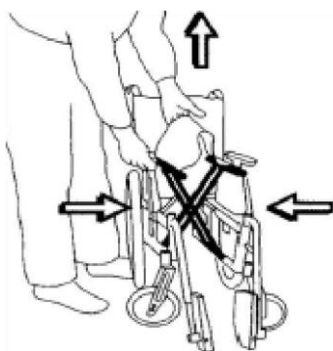

Så här fäller du ned rullstolen: Ta av sätet. Lyft fotstöden. Lyft sätets klädsel (bilden till vänster).

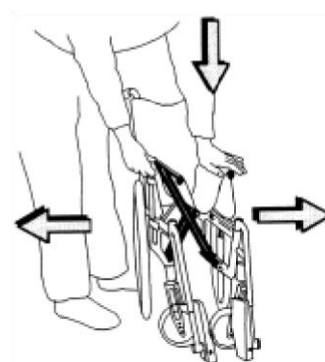

Så här fäller du upp rullstolen: Placera båda händerna på sättsklädselns rör och tryck dem nedåt (bilden till höger). Var försiktig och placera inte händerna mellan rören och rullstolsramen när du fäller upp rullstolen.

## 5. Etikett

Nedan finns ett exempel på en produktetikett som har placerats på en travers.

|                             |                       |                       |                           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Serienummer enligt GS1 128  | SN                    | ICON 35               | Produktnamn               |
| Streckkod EAN – GS1 128     | 2019-12-03            | 2019-12-03            | Tillverkningsdatum        |
| Medicinsk produkt           | RWB35S2WH0            | RWB35S2WH0            | Produktnummer             |
| Tillverkare                 | 40 cm                 | 40 cm                 | Maximal bredd             |
| EAN 13 streckkod enligt GS1 | 115 kg                | 115 kg                | Maximal användarvikt      |
|                             | Max 10°               | Max 10°               | Maximal lutningsvinkel    |
|                             | 40 cm                 | 40 cm                 | Maximal sitslängd         |
|                             | CE MD                 | CE MD                 | Ta del av bruksanvisninge |
|                             | REHASENSE Sp. z o.o.  | REHASENSE Sp. z o.o.  | Kan användas utomhus      |
|                             | Sulejowska 45 G       | Sulejowska 45 G       |                           |
|                             | 97-300 Piotrków Tryb. | 97-300 Piotrków Tryb. |                           |
|                             | Poland                | Poland                |                           |
|                             | 5 907467 805641       | 5 907467 805641       |                           |

## 6. Användning

### Så här lyfter du på rullstolen

Rullstolen får endast lyftas med hjälp av handtagen och rullstolens främre övre hörn där stöden är fästa.

**WARNING! Rullstolen får inte lyftas med stöden eller armstöden! Innan rullstolen lyfts ska stöden monteras ned.**



### Att ta sig till och från rullstolen

Det är viktigt att man lär sig att förflytta Användare under tillsyn av kompetent personal. Här nedanför presenteras endast våra rekommendationer:

#### Att flytta Användaren från rullstol till säng

Användaren bör vara riktad med ansiktet mot sängen oavsett om han eller hon får hjälp av någon eller inte. Kör med rullstolen så nära sängen som möjligt så att framhjulen är riktade fram mot sängen. Dra i bromsen, lyft armstöden/ sidopanelerna som finns på rullstolens sidor.



#### Att flytta Användaren från säng till rullstol

Användaren bör vara riktad med ansiktet från sängen oavsett om han eller hon får hjälp av någon eller inte. Kör med rullstolen så nära sängen som möjligt så att framhjulen är riktade fram mot sängen. Dra i bromsen, lyft fotstöden. Trampa inte på fotstöden, annars kan rullstolen välta. De som hjälper användaren bör först och främst använda benmusklerna för att flytta Användaren till rullstolen och undvika att luta sig för mycket eller överanstränga ryggmusklerna.




### Rullstolskörning

Rätt viktfordelning är avgörande för rätt rullstolsanvändning. Huruvida rullstolen fungerar korrekt beror inte bara på dess vikt utan även kroppsproportioner, rullstolsanvändarens och bakhjulets ställning. Ju jämnare viktfordelning av rullstolsanvändaren på bakhjulen, desto lättare framdrivning. Ju jämnare viktfordelning av rullstolsanvändaren på framhjulen, desto svårare framdrivning.

**WARNING! Kontrollera alltid att bromsarna har dragits i när du lämnar Användaren medan han eller hon sitter i rullstolen.**

**WARNING! Kontrollera alltid att de svängbara framhjulen är riktade framåt om rullstolen står still för att säkerställa bättre kontakt med ytan.**

### Att ta sig över trösklar

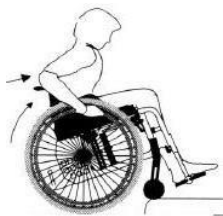

Användaren med ansiktet riktat mot tröskeln

**(Vi rekommenderar att dessa tekniker endast tillämpas av erfarna Rullstolsanvändare)**

Kör med rullstolen så nära tröskeln som möjligt

Luta rullstolen bakåt genom att balansera på bakhjulen och lyft på de främre styrhjulen i höjd med tröskeln.

Skjut bakhjulen framåt och luta dig samtidigt för att flytta kroppsvikten mot rullstolens framsida.



Assistent och användaren med ansiktena riktade mot Användaren

Assistenten lutar rullstolen bakåt med hjälp av fotpedalen och låter de svängbara framhjulen köra av ytan. Kör framåt tills bakhjulen rör vid kanten. Använd sedan handtagen på rullstolens baksida för att lyfta bakhjulen ovanför tröskeln



#### Användare med ryggen mot tröskeln

(Denna teknik fungerar endast vid låg tröskel och om stöden inte räcker ner till marken. Kör med rullstolens baksida mot tröskeln tills bakhjulet rör vid den. Skjut bakhjulen bakåt och luta dig framåt samtidigt.



#### Assistent och Användare med ryggen mot tröskeln

Kör till tröskeln så att bakhjulen rör vid kanten. Lyft bakhjulen med handtagen på rullstolens baksida bakåt över kanten på tröskeln. Luta rullstolen bakåt. Dra sedan rullstolen bakåt mot tröskeln tills de främre svängbara hjulen är ovanför tröskeln. Sänk sedan försiktigt de främre svängbara hjulen på ytan.

### **Så här kör du av tröskeln**

#### Användaren med ansiktet riktat mot tröskelkanten

(Vi rekommenderar att dessa tekniker endast tillämpas av erfarna Rullstolsanvändare)

Kör med rullstolen så nära tröskelkanten som möjligt.

Balansera med rullstolen på bakhjulen och låt de främre svängbara hjulen köra av ytan i den mån det är nödvändigt.

Kör långsamt av kanten och sänk långsamt de svängbara hjulen på ytan.



#### Assistent och Användare med ansiktet mot tröskelkanten

Luta rullstolen bakåt med hjälp av fotpedalen och låt de främre framhjulen köra av ytan i den mån det är nödvändigt.

Kör sakta ned med rullstolen från kanten och sänk försiktigt framhjulet på ytan.




#### Användare med ryggen mot tröskeln

**(Denna teknik rekommenderas inte för trösklar högre än 10cm).**

Kör rullstolen så nära tröskelkanten som möjligt.

Kör sakta av tröskeln samtidigt som du sakta lutar dig framåt

**WARNING! Detta kan vara farligt och leda till att rullstolen välter.**

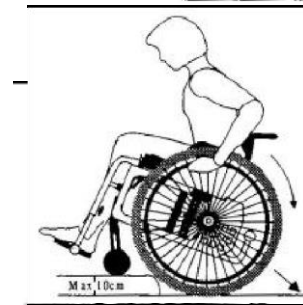

#### Assistent och Användare med ryggen mot tröskelkanten

Kör rullstolens baksida så nära tröskelkanten som möjligt. Kör sakta av tröskeln och dra rullstolen på bakhjulen tills framhjulen kör av kanten. Sänk dem sedan på ytan.



### **Att ta sig över ojämnheter**

Vänligen följ dessa instruktioner när du tar dig över ojämnheter:

- Undvik att ändra körriktning
- Kör på en rak linje. Sväng inte åt sidan.
- Be någon om hjälp för att reducera risken.
- När du kör över en ojämnheter ska du luta dig framåt för att flytta fram tyngdpunkten och öka rullstolens stabilitet.

- När du kör av en ojämnhet ska du luta dig bakåt för att flytta tyngdpunkten bakåt och öka rullstolens stabilitet.
- Kontrollera hastigheten med bakhjulsfästena, inte med bromsarna.

## Att köra uppför och nedför trappa

**WARNING! Be alltid någon om hjälp. Rullstolen ska flyttas av minst 2 personer i god form.**

**WARNING! Kör aldrig själv eller med hjälp av någon annan uppför rulltrappa.**



### Uppför trappan:

Skjut rullstolen mot trappan tills bakhjulen rör vid det första steget. Använd handtaget för att luta rullstolen bakåt. Den andra personen som hjälper till ska ta grepp om ramens nedre främre hörn.

**WARNING! Lyft aldrig rullstolen med stöden.**

Rullstolen ska bäras långsamt uppför trappan, steg för steg. När tagit dig över sista steget ska du luta rullstolen bakåt tills framhjulen sänks på golvet. De som hjälper användaren bör först och främst använda benmusklerna för att flytta rullstolen uppför trappan och undvika att luta sig för mycket eller överanstränga ryggmusklerna.

### Nedför trappan:

Rullstolen ska bäras nedför trappan på samma sätt som uppför trappan.

## 7. Rengöring och desinficering

### Ramen

Ramen ska rengöras med en fuktad trasa, eventuellt med mildt rengöringsmedel. Den ska sedan torkas av med en torr trasa. Ramen ska kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella färgdefekter som kan orsaka korrosion. Vid synliga ramdefekter (sprickor, färgdefekter osv.) ska du höra med den lokala försäljaren angående diagnostik och underhåll.

### Klädsel

Sätet och ryggstödet är tillverkade av förstärkt nylon med hög slitstålighet. Sätets klädsel kan enkelt tas av genom att skruva loss ramens skruvar. Ryggstöds klädsel kan tas av genom att skruva loss ryggstödsrörens skruvar. Sätet och dess klädsel kan tvättas med en svamp och mildt rengöringsmedel.

Smuts på metall- och plastdelarna kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller en mjuk trasa. Ta del av produktinformationen och använd endast rengöringsmedel som är avsedda för rengöring och desinficering (inga lösnings- eller slipmedel).

### Desinficering

Kontakta försäljaren för att kontrollera att desinficeringen har utförts av kompetent personal. För att desinficera produkten själv får du använda allmänt tillgängliga desinficeringsmedel utan klor och fenol. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstått i samband med felaktig användning av desinfektionsmedel.

## 8. Underhåll och service

Trots sin robusta konstruktion och slitåliga material, förslits produkten. Det rekommenderas att den kontrolleras av specialister med jämna mellanrum.

För grundläggande servicearbeten räcker det med insticksnycklar, skiftnycklar, en platt skruvmejsel och en kryssmejsel.

### Delar som ska kontrolleras regelbundet:

| Delens namn           | Typ av kontroll                                                                                                                                                                                                                       | Kontrollfrekvens       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Däck                  | Däcktryck (2,0-2,2 bar), tillstånd av gängor och däck. Upprätthåll trycket i båda däck på samma nivå. Hårdare däck ger bättre manövrerbarhet och underlättar körningen. Samtidigt ger de lägre körkomfort vid körning på ojämna ytor. | Minst en gång i veckan |
| Montage av framhjulen | Skruvarnas stramhet Vid justering av främre hjulfästen som är lösa kan skruven spricka och rullstolen kan välta.                                                                                                                      | Minst en gång i veckan |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekrar              | Om ekrarna är lösa kan bakhjulen deformeras. Kontakta försäljaren eller lokal cykelservice för att reda ut problemet                                                                                                                                                                                   | Om problemet har upptäckts                                                                    |
| Hjulaxlar          | Avlägsna hår eller ansamlad smuts                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vid behov                                                                                     |
| Drivhjulsringar    | Repade hjulringar ska bytas ut då de kan utsätta Användarens händer för skador vid körning                                                                                                                                                                                                             | Vid behov                                                                                     |
| Bromsar            | Bromskraften beror på däcktrycket. Bromsprestandan kan påverkas av smuts som ansamlas i däcken. Håll bromsarna rena genom att torka av dem med en fuktad trasa för att få bort smuts. Smörj in skruvar som bromsspakarna roterar på.<br>Kontrollera bromsens horisontella position.                    | Bromsfunktionen ska kontrolleras minst en gång i veckan                                       |
| Ramen              | Håll rullstolen ren för användarkomfort                                                                                                                                                                                                                                                                | Minst en gång i månaden, beroende på användning                                               |
| Styrhjul           | Utrymmet mellan hjulfästet och framhjulet ska hållas rent då eventuell smuts kan orsaka snabbare förslitning av styrhjulen<br>För att avlägsna smuts, ska det främre svängbara tas av från fästena. Därefter ska smuts avlägsnas och hjulens metallelement ska säkras (t.ex. med hjälp av smörjmedel). | Underhåll ska utföras minst en gång i månaden eller oftare beroende på typ av yta och villkor |
| Löstagbara element | Kontrollera rullstolens löstagbara element. Lösa skruvar ska dras åt.                                                                                                                                                                                                                                  | Vid intensiv användning av rullstolen ska den kontrolleras en gång i månaden                  |

### Vanligt förekommande problem och lösningar

Har du upptäckt några funktionsfel hos rullstolen, bör du avbryta användningen. Kontakta rullstolsleverantörens lokala butik eller serviceavdelning. Tillverkaren garanterar inte att rullstolen kommer att fungera korrekt om andra än originalreservdelar används.

| Symtom                                        | Möjliga orsaker                                                                                                                                                     | Vad ska jag göra?                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rullstolen lutar sig åt ena sidan             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ena däckets tryck kan vara mer pumpat än det andra</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pumpa däck (2,0-2,2 bar).</li> <li>Kontrollera rullstolens viktfordelning</li> </ul>                                                                                |
| Det är svårt att skjuta rullstolen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lågt lufttryck i däcken</li> <li>Smuts på framhjulets axel</li> <li>För hög belastning av de svängbara framhjulen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pumpa däck (2,0-2,2 bar).</li> <li>Avlägsna smuts eller hår från de svängbara framhjulets axlar</li> <li>Flytta tyngdpunkten.</li> </ul>                            |
| Det är svårt att svänga rullstolen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lågt däcktryck</li> <li>Framhjulets horisontella axlar är för hårt fastsatta</li> <li>Smuts på framhjulets axel</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pumpa däck (2,0-2,2 bar).</li> <li>Kontrollera framhjulets axlar och lossa dem vid behov.</li> <li>Avlägsna smuts eller hår från de svängbara framhjulen</li> </ul> |
| Bromsarna fungerar inte korrekt               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lågt lufttryck i däcken</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pumpa däck (2,0-2,2 bar).</li> </ul>                                                                                                                                |
| Det är svårt att fälla upp och ned rullstolen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klädseln är för spänd</li> <li>Smuts i korsramens gångjärn</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lossa skruvarna som håller klädseln och dra åt dem igen.</li> <li>Rengör och smörj korsramens gångjärn.</li> </ul>                                                  |
| Rullstolen är ostabil                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lågt lufttryck i däcken</li> <li>Rullstolens element är inte stela och täta</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pumpa däck (2,0-2,2 bar).</li> <li>Se till att alla skruvar och muttrar är åtdragna.</li> </ul>                                                                     |
| Däckpunktering                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det kan finnas hål i rör eller däck</li> <li>Förslitning av däck och rör</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontakta den närmaste rullstolssäljaren eller cykelservice för att reparera skadade rör eller däck</li> </ul>                                                       |

Om det uppkommer några produktfel rekommenderar vi att du kontaktar auktoriserad service eller försäljaren du köpte rullstolen av. Tillverkarens garanti omfattar inte produktens funktion om produkten har reparerats av oauktoriserad servicetekniker och/eller originalreservdelar inte har använts.

**WARNING! Vid oauktoriserad reparation slutar garantin gälla.**

#### **Auktoriserad service**

För att genomföra auktoriserad reparation ska du kontakta försäljaren du köpte produkten av eller själva tillverkaren.

#### **Att skicka rullstolen eller dess delar till service**

För att få rullstolen lagad behöver du kontakta den lokala försäljaren eller tillverkarens service. Rullstolen eller dess delar ska skickas i en skyddsförpackning för att förebygga eventuella transportskador. Det är bäst att använda originalförpackningen. Transporten bör utföras av den transportfirma som anvisats av tillverkaren.


**WARNING! Tillverkaren är inte ansvarig för skador i anordningen eller dess komponenter som uppstått vid transport eller till följd av felaktig förpackning.**

#### **Bortskaffande och återvinning av produkten**

Anordningen ska bortskaffas enligt gällande lokala och nationella föreskrifter. Kontakta en lokal återvinningsstation eller auktoriserad köpare för att bortskaffa förpackningar, metallram komponenter, plast- och metalldelar på rätt sätt.

## **9. Transport och förvaring**

### **Transportrekommendationer**

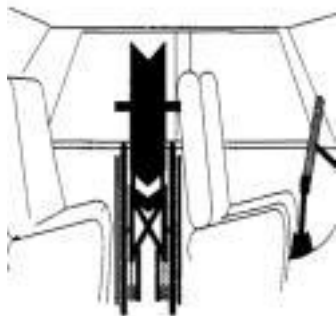

ICON 35-rullstolen är lätt att transportera. Den kan fällas ihop och nedmonteras för att reducera storleken och vikten. Det finns möjlighet att ta av bakhjulen och stöden och fälla ihop korsramen enligt ovan.

**WARNING! Rullstolen är inte någon bilstol. Det är förbjudet att sitta i rullstolen under bilresa. Rullstolen ska fällas ihop och fixeras på ett säkert sätt.**

### **Förvaring**

Anordningen ska förvaras i ett torrt utrymme vid temperatur över 0°C. Rullstolen kan fällas ihop så att den tar mindre plats vid förvaring. Fotstöden kan också nedmonteras så att rullstolen tar ännu mindre plats. Vid temperatur under noll eller fukt kan däck, material, axlar, lager och andra element utsättas för skador. För att skydda däcken mot deformationer vid långvarig förvaring ska träunderlägg eller andra stöd placeras under ramen. Vi rekommenderar att du täcker rullstolen för att skydda den mot smuts och damm.

## **10. Återanvändning**

Vår medicinska utrustning kan användas av en annan användare om den ursprungliga användaren inte längre behöver den. Utrustningen ska först kontrolleras noggrant och desinficeras av en auktoriserad tekniker hos försäljaren.

Följande element ska kontrolleras:

- strukturens stelhet,
- infästning av skruvar och muttrar
- tygelement,
- hjul och kullager,
- bromsarnas prestanda och skick.

Om något av elementen ovan är slitet eller skadat, ska det bytas ut. Vi rekommenderar särskilt att du installerar nya hjul för varje ny användare. Alla lösa skruvar och muttrar ska dras åt. Produkten ska rengöras och desinficeras noggrant.

**WARNING! Rullstolen får inte användas om ramen är böjd eller trasig.**

Varje ny användare ska få utrustningen med bruksanvisning.

## 11. Garanti

### Garantiinformation

- Produkten omfattas av 24 månaders garanti som löper från inköpsdatumet.
- Under denna period ska alla materialdefekter som tillverkaren bär ansvar för eller som uppstått till följd av att fel material använts lagas eller bytas ut kostnadsfritt.
- Däck-, klädsel- och ekerskador som uppstått till följd av att anordningen förslitits med tiden omfattas inte av garantin. Andra rullstolsdelar som förslits vid användning täcks inte heller av garantin.
- Alla mekaniska skador och skador som uppstått till följd av felaktig användning eller användning i strid med produktens ändamål täcks inte av garantin.
- Vid oauktoriserade ändringar och modifikationer i rullstolen slutar garantin gälla.
- Eventuella defekter eller skador ska anmälas till leverantören omedelbart.

### Ansvarsomfattning

- Garantin omfattar inte transportkostnader.
- Garantin omfattar inte skador som uppstått till följd av produktfel.
- Garantin omfattar inte skador som uppstått till följd av att man saknar förmågan att använda produkten.
- Producenten är inte ansvarig för skador som uppstått till följd av att användaren inte följt eller missförstått denna bruksanvisning.

### Modifikationer i rullstolen eller tilläggselement

- Denna definition avser alla rullstolar som har modifierats eller som skiljer sig från de detaljer som beskrivs i denna bruksanvisning eller om extra element som inte levererats av tillverkaren har monterats vid produkten. Om Användaren modifierat anordningen enligt ovan utan att ha inhämtat tillverkarens skriftliga samtycke, uppfyller den inte CE-kraven och omfattas inte av garantin.
- Vid frågor om modifikationer, vänligen kontakta Tillverkaren innan du vidtar några åtgärder.

## 12. Tekniska uppgifter

De tekniska uppgifterna skiljer sig beroende på ramdimensioner och rullstolskonfiguration (fram- och bakhjulen). Uppgifterna i tabellen avser ett 40cm brett och 40cm djupt säte. Alla mått anges i centimeter (cm) för avstånd och kilo (kg) för vikt såvida annat inte bestämts.

|                         | ICON 35Bx           | ICON 35Lx |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| Korsramen               | 2 x 2               |           |
| Sätets bredd            | 40 (45, 50)         |           |
| Sätets djup             | 40                  |           |
| Maximal användarvikt    | 125                 |           |
| Rullstolens längd       | 103                 |           |
| Rullstolens höjd        | 91                  |           |
| Rullstolens bredd       | 56 (61, 66)         |           |
| Längd (utan stöd)       | 65                  |           |
| Höjd vid nedfällt läge  | 74                  |           |
| Bredd vid nedfällt läge | 27                  |           |
| Totalvikt               | 9.0                 | 9.8       |
| Transportvikt           | 8.1                 | 8.9       |
| Framsätets höjd         | 44-49               |           |
| Ryggstödet höjd         | 42                  |           |
| Stödets längd           | 32-45               |           |
| Stödets vinkel (°)      | 73°                 |           |
| Armbågsstödet höjd      | 22                  | 18-25     |
| " bakhjul               | 14" (20", 22", 24") |           |
| " framhjul              | 7"                  |           |

\* Standardmått = sätets bredd 40cm

## 13. Konfiguration och användning av rullstolen

### 13.1. Introduktion till ICON 35

ICON 35-ramar möjliggör olika inställningar av storlek (bredd) och justering av sätets höjd och stabilitet beroende på Användarens behov. Ramen är så utformad att den låses när den blir spänd under belastning. Både ICON 35Bx och ICON 35Lx har fast ramdjup. ICON 35Bx har armstöd med fast höjd, medan ICON 35Lx har armstöd med justerbar höjd.

**WARNING! Främre och bakre axeln samt hjuldiametrar får endast ändras av kvalificerad personal eller en sjukgymnast utbildad inom rullstolsmontage. För att få mer detaljerad information, vänligen kontakta Rehasense eller Försäljaren.**

**WARNING! Vid felaktig konfiguration kan rullstolen bli ostabil, vilket kan vara farligt för användaren. Kontakta alltid försäljaren om du tror att du behöver byta ut några delar.**

#### 13.1.1. ICON 35Bx

ICON 35Bx är den bästa modellen från ICON 35 serien. Armstöden har fast höjd. De mindre bakhjulen har fast position, 14". De större bakhjulen har flera olika positioner, dvs. 20"/22"/24". De främre svängbara hjulen är justerbara, vilket möjliggör optimal inställning av sätets höjd och vinklar.

Konfiguration av armbågsstöd - ICON 35Bx

Montage av armstöd:



- Armstödet har fast höjd.

**Konfiguration av ramen - ICON 35Bx**


Det finns möjlighet att ändra ramens höjd och vinklar genom att ändra hjulstorleken (diameter)

Montage av bakhjul 14"



- Bakhjulet 14" har fast axelhöjd

### Montage av bakhjul 20" / 22" / 24"

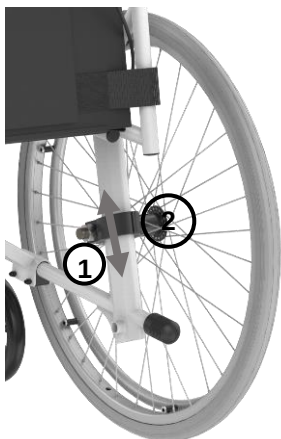

- De stora bakhjulen har justerbar axelhöjd.
- För att modifiera axelhöjden, lossa muttern (1), flytta bakhjulets klämma (2) uppåt eller nedåt till önskad position och dra sedan åt muttern (1) i den nya positionen.
- Gör samma sak på den andra sidan.

**WARNING! Se till att båda positioner är justerade till samma höjd.**

### Justering av framhjulsmontage




Om bak- eller framhjulets position eller storlek modifieras, kan du behöva justera det svängbara hjulets vinkel för att förhindra hjulvibrationer och säkerställa smidig körning.

Lageruppsättningens huvud (1) ska alltid vara placerad vid 90 graders vinkel mot ytan.

Efter att ha ändrat hjulinställningarna behöver du justera vinkeln

Så här gör du för att justera lageruppsättningens vinkel:

- Lossa de 2 skruvarna (2). Justera sedan lageruppsättningen tills lagrets vertikala axel (1) är placerad vid 90 graders vinkel mot ytan
- Använd Loctite-lim och dra åt skruvarna.

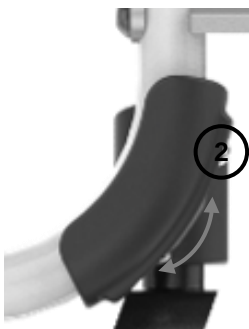

För att modifiera sätets höjd kan du montera framhjulen i olika positioner (3). (På ritningen visas främre hjulfästen med 5 olika positioner.) Olika hål möjliggör även montage av framjul med olika diametrar.

**WARNING! Alla justeringar får endast utföras av kvalificerad service eller en sjukgymnast med erfarenhet inom rullstolskonfiguration. För att få mer detaljerad information, vänligen kontakta Rehasense eller Försäljaren.**



### **13.1.2. ICON 35Lx**

ICON 35Lx är en lyxig modell från ICON 35-serien. Armstödet har justerbar bredd och längd, vilket gör det lättare för användaren att sätta sig.

De mindre bakhjulen har fast position, 14". De större bakhjulen har flera olika positioner, dvs. 20"/22"/24". Det främre svängbara hjulets vinkel är justerbar, vilket möjliggör olika inställningar av sätets höjd och vinklar och anpassning till Användarens behov.

**WARNING! Främre och bakre axeln samt hjuldiametrar får endast ändras av kvalificerad personal eller en sjukgymnast utbildad inom rullstolsmontage. För att få detaljerade instruktioner, kontakta Rehasense eller Försäljaren.**

## Montage av armbågsstöd - ICON 35Lx

### Montage av armstöd



- Armstöd har justerbar höjd
- Låg höjd möjliggör placering under ett skrivbord eller ett bord.
- Hög höjd ger mer komfort när man sätter sig i eller tar sig upp ur rullstolen

### **Inställning av ramen - ICON 35Lx**


Det finns möjlighet att ändra ramens höjd och vinklar genom att ändra hjulstorleken (diameter)

### Bakhjulets uppsättning 14"



- Bakhjulet 14" har fast axelhöjd

### Montage av bakhjul 20" / 22" / 24"

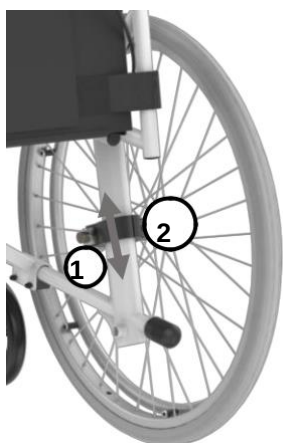

- De stora bakhjulen har justerbar axelhöjd.
- För att ändra axelhöjden ska du lossa muttern (1), flytta den bakre hjulkämmen(2) uppåt eller nedåt till önskad position, a następnie dociągnąć nakrętkę (1) w nowej pozycji
- Gör detta på båda sidor

**WARNING! Se till att båda positioner är justerade till samma höjd.**

## Justering av framhjulsmontage



Vid ändring av bak- eller framhjulens position eller storlek kan du behöva justera det svängbara hjulets vinkel för att förebygga hjulvibration och säkerställa smidig körning.

Lageruppsättningens huvud **(1)** ska alltid vara placerad vid 90 graders vinkel mot ytan. Efter att ha ändrat hjulinställningarna behöver du justera vinkeln.

Så här gör du för att justera lagerhöljets vinkel:

- Lossa de 2 remmarna **(2)**. Justera sedan lageruppsättningen tills lagrets vertikala axel **(1)** är placerad vid 90 graders vinkel mot ytan
- Använd Loctite-lim och dra åt skruven.



För att ändra sätets höjd kan du montera framhjulen i olika positioner **(3)**. (På ritningen visas främre hjulfästen med 5 olika positioner.) Olika hål möjliggör även montage av framhjul med olika diametrar.




**WARNING! Samtliga justeringar enligt ovan får endast göras av kompetent service eller en sjukgymnast. För att få mer detaljerad information, vänligen kontakta Rehasense eller Försäljaren.**

## **Sätets klädsel och konfiguration av ryggstödet - ICON 35Lx**


Lx är utrustad med ett ergonomiskt säte och beklätt ryggstöd med stilig form i två färger av mesh 3D-tyg. Detta ger ett mjukt säte, luftcirkulation och mer komfort när man sitter i rullstolen. Klädseln kan tas av för tvätt.

### Sätet och ryggstödet klädsel

- För att ta av sätets klädsel, ska du dra av kardborrebandet **(1)** och lossa skruvarna **(2)** på vänster och höger sida.

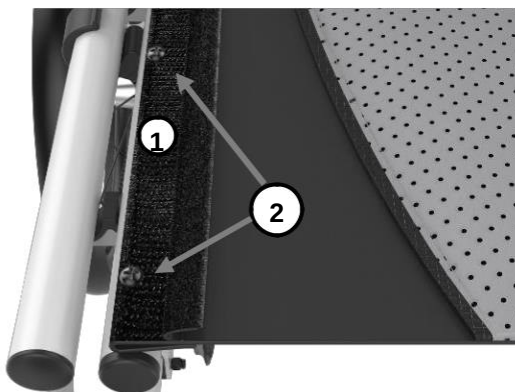

- För att ta av ryggstödet klädsel, dra av kardborrebandet från det nedre bakre röret **(3)** och lossa skruvarna **(4)** på vänster och höger sida.

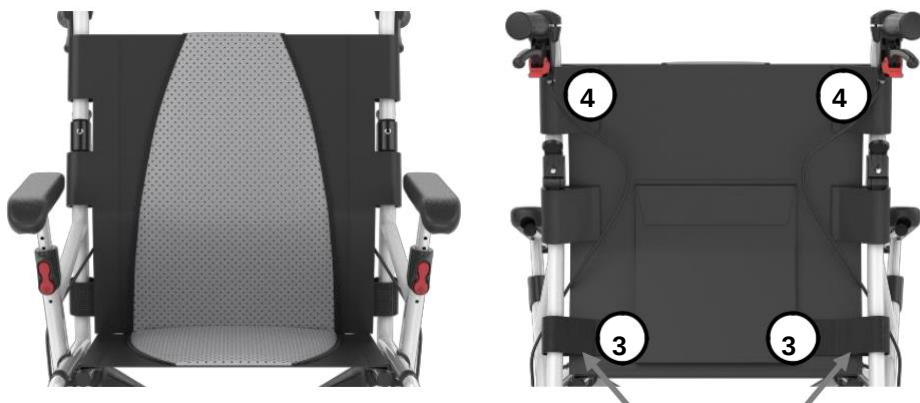

## 13.2. Generellt

### 13.2.1. Hjul


#### Bakhjul

Beroende på beställning kan rullstolen utrustas med bakhjul med följande diameter: 14", 20", 22" eller 24". Hjulen kan utrustas med pneumatiska däck eller punkteringssäkra PU-däck. Andra hjulstorlekar och typer finns tillgängliga mot beställning.

14"-hjul levereras som standard och är avsedda för rullstolskörning med en Assistent. Rullstolar med större hjul (20"/22"/24") kan användas för körning på egen hand.

#### Skruvaxlar

14" bakhjul är utrustade med skruvaxlar som möjliggör montage och nedmontering med verktyg.

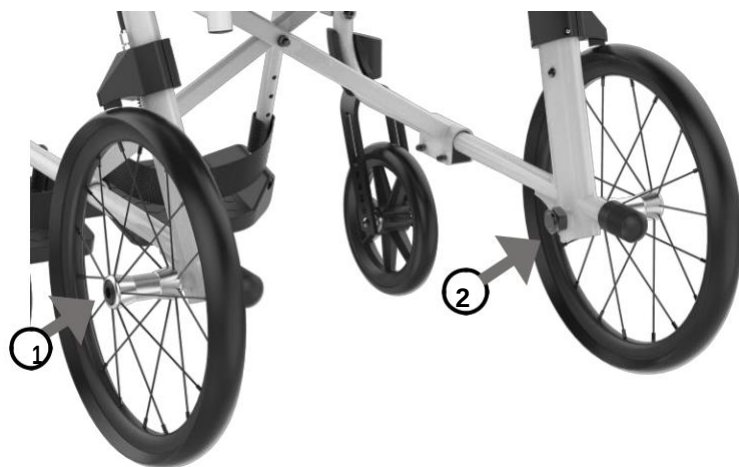

Så här gör du för att ta ut hjulet ur ramen:

- Håll muttern **(2)** och lossa skruven **(1)**, dra sedan ut hjulet ur lagret

Så här gör du för att sätta in hjulet:

- Dra skruvaxeln **(1)** mot lagret, dra åt skruven **(1)** och muttern **(2)**
- Kontrollera om hjulnavet är tätt åtdragen.

### Snabbfästande axel

Stora bakhjul (20"/22"/24") är utrustade med snabbfästande axlar som möjliggör snabbt montage eller nedmontering.



Så här gör du för att ta ut hjulet ur ramen:

- Håll lossningsknappen **(1)** nedtryckt och dra ut hjulet ur lagret.


Så här gör du för att sätta in hjulet:

- Placera axeländan i lagret **(2)**, håll lossningsknappen **(1)** nedtryckt, tryck in axeln i lagret och släpp knappen.
- Försök dra ut hjulet ur lagret för att kontrollera att det är låst i fast läge.

**WARNING!** Akta fingrarna när du monterar eller monterar ned hjul. Placera inte fingrarna mellan ekrarna eller däcken och drivringen.

**WARNING!** Akta fingrarna när du skjuter rullstolen. Placera inte fingrarna mellan ekrarna eller däcken och drivringen. Använd ekerskydd som finns tillgängliga som extra tillbehör för att skydda fingrarna.

### 13.2.2. Bromsar

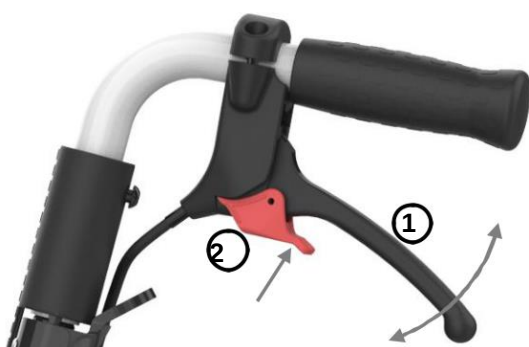

Lossad broms



Ansatt och låst broms

- För att kontrollera bromsen, dra båda bromsspakarna **(1)** samtidigt och kontrollera bromskraften.
- För att stoppa rullstolen helt, dra bromsspakarna tills rullstolen stannar.
- För att lossa bromsarna, lossa helt enkelt båda bromsspakarna så att de går ner av sig själva.

För att använda bromsarna som parkeringsbromsar, ska de låsas i ansatt läge.


- När bromsarna aktiveras med bromsspaken **(1)**, tryck de 2 små låsspakarna **(2)** under bromsspakarna.
- För att låsa upp låsta bromsar, dra helt enkelt båda bromsspakarna mot skjuthandtagen och släpp dem sedan. Bromsarna kommer att låsas upp av sig själva.

### 13.2.3. Fotstöd


Aluminium med fästskruv för höjdjustering och hopfällbara fotstöd.

- Stöden kan enkelt vändas utåt och knäppas ut. De kan även vändas inåt under sätet så att man kan röra med benen kring rullstolen.
- Fotstöden har justerbar höjd. Om rullstolen används utomhus ska det minimala avståndet mellan fotstöd och yta vara 4-5 cm.
- För att möjliggöra enkel förflyttning till och från rullstolen, kan fotstöden fällas ihop (A)

**WARNING! Det är förbjudet att trampa på fotstöden. Det finns nämligen en risk för att rullstolen välter.**

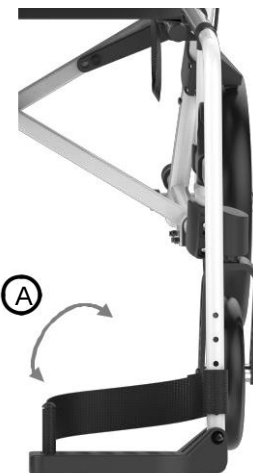

#### Justering av fotstödsuppsättningen

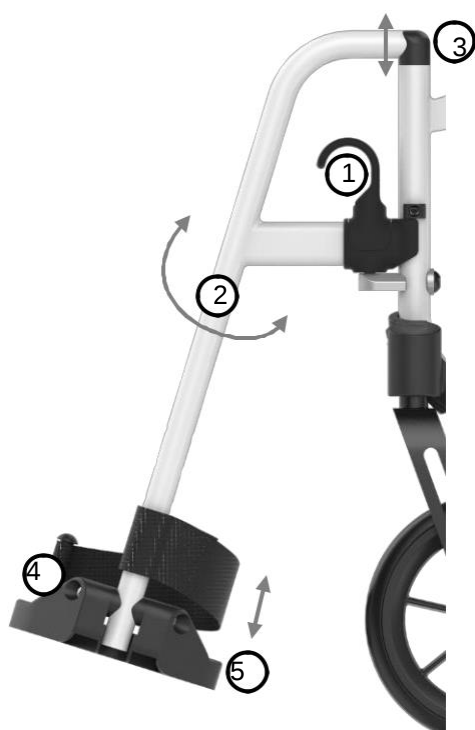

Så här gör du för att vända eller knäppa ut fotstödet:

- Tryck låsspaken (1).
- Vänd fotstöden (2) utåt till ca. 45°.
- Dra dem sedan uppåt för att knäppa ut dem ur rullstolsramen (3).

Så här gör du för att knäppa in stödet:

- Håll ena sidan ca. 45° mot ramen.
- Stoppa sedan in stödändan i ramhålet (3).
- När stödet hänger från ramen ska du vända den framåt (2). Fotstödet bör låsas automatiskt.
- Kontrollera att vänster och höger fotstöd är fästa vid rätt sida på ramen.

Så här gör du för att justera fotstödet höjd:


- Lossa låsskruven (4).
- Ställ sedan in stödet längd genom att flytta fotstödet (5) uppåt eller nedåt till önskad höjd (6 positioner).



- Placera skruv i rätt hål och tryck in den med muttern

### 13.2.4. Armstöd

#### Armstöd (höjdjustering)

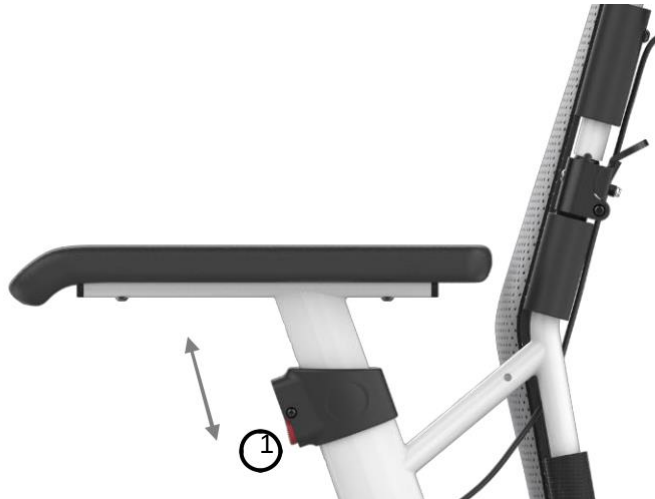

Armstöden ICON 35Lx har justerbar höjd.

Så här gör du för att justera armstödens höjd:

- Håll den runda röda knappen **(1)** på ramens nedre sida nedtryckt.
- Ställ in önskad höjd på armstödet med andra handen. Släpp knappen sedan.

**WARNING!** Använd aldrig armstöd som grepppunkter för att lyfta eller flytta på rullstolen.

**WARNING!** Båda armstöd ska justeras till samma höjd.

### 13.2.5. Stödmekanismen som fälls ihop i hälften

Både Bx och Lx versionen är utrustad med en stödmekanism som fälls ihop i hälften och gör det möjligt att reducera rullstolens storlek för förvaring eller skötsel. Den är mest kompakt när handtagen ligger jämnt med ramen i nedfällt läge.

#### Justering av stödmekanismen som fälls ihop i hälften



För att fälla ihop mekanismen behöver du skjuta handtagsrören:

- Tryck in de 2 spakarna **(1)** i den hopfällbara stödmekanismen.
- Fäll ihop handtagsrören bakåt.

För att fälla upp mekanismen ska du trycka handtagsrören:


- Dra handtagsrören bakåt så att de låses automatiskt i sin ursprungliga position.

## 14. Tillbehör

### 14.1 Säte och ryggstöd med högsta komfort

Utrustad med ett ergonomiskt säte och beklätt ryggstöd med stilig form i två färger av mesh 3D-tyg. Detta ger ett mjukt säte, luftcirkulation och mer komfort när man sitter i rullstolen.

#### 14.1.1 Bälten för justering av sätets spänning

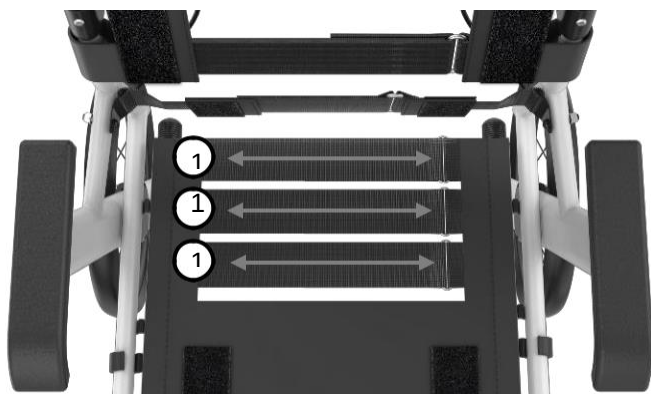


Det finns möjlighet att justera spänningen av sätets bälten för att anpassa dem till Användarens individuella behov.

Så här gör du för att justera sätets bälten:

Justera spänningen av de 3 kardborrebanden **(1)** för att säkerställa optimal komfort.

#### 14.1.2 Bakre bälten för spänningsjustering

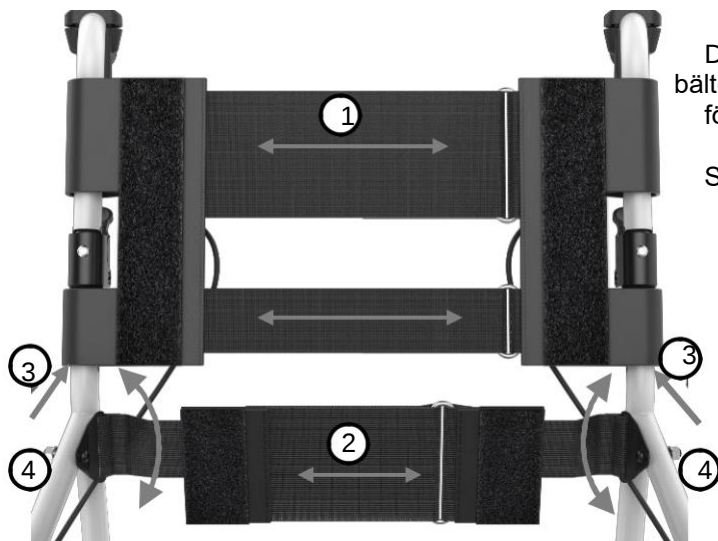

Det finns möjlighet att justera spänningen av de bakre bältena för att anpassa dem till Användarens individuella behov.

Så här gör du för att justera ryggstödet:

- Justera spänningen av de 2 kardborrebanden **(1)** i den övre delen för att säkerställa optimal komfort.
- Justera spänningen av kardborrebanden **(2)** i den övre delen för att säkerställa optimal komfort.
- Nedre ryggstödsbälten med enkelt kardborreband **(2)** kan vändas för att säkerställa bättre komfort för ländryggen.
- Nedre ryggstödsbälten med enkelt kardborreband **(2)** kan dessutom flyttas uppåt för att fästas i ett nytt hål **(3)** på bakre röret genom att lossa och späna upp klämmorna **(4)** för att få en högre position och säkerställa bättre ryggstöd.

#### 14.1.3 Beklätt säte och stöd



Fästs vid sätet med justerbar spänning och ryggstödsbälten med kardborreband. Du behöver bara ett par sekunder för att ta av eller sätta på klädseln.

## 14.2 Vältskydd

### 14.2.1 Vältskydd (gungskydd) - montage på vänster sida (vy bakifrån)

Detta skydd ger ökad stabilitet och användarsäkerhet. Det rekommenderas särskilt för Användare som haft sina nedre kroppsdelar amputerade, men är lämpligt för samtliga Användare.

**WARNING! Vältskyddet får endast monteras av specialiserad service och en erfaren sjukgymnast.**



Vältskyddet är aktivt när de små hjulen placeras lågt ovanför ytan. När det sitter högt ovanför ytan är skyddet inte aktivt.

För att aktivera eller inaktivera vältskyddet ska du ta tag om främre röret och dra det nedåt.


Vrid det sedan runt främre axeln till ramens inre sida.

Släpp sedan röret som låses automatiskt

### 14.2.2 Vältskydd (slirskydd) - montage på vänster sida (vy bakifrån)

Detta skydd ger ökad stabilitet och användarsäkerhet. Det rekommenderas särskilt för Användare som haft sina nedre kroppsdelar amputerade, men är lämpligt för samtliga Användare.

**WARNING! Vältskyddet får endast monteras av specialiserad service och en erfaren sjukgymnast.**

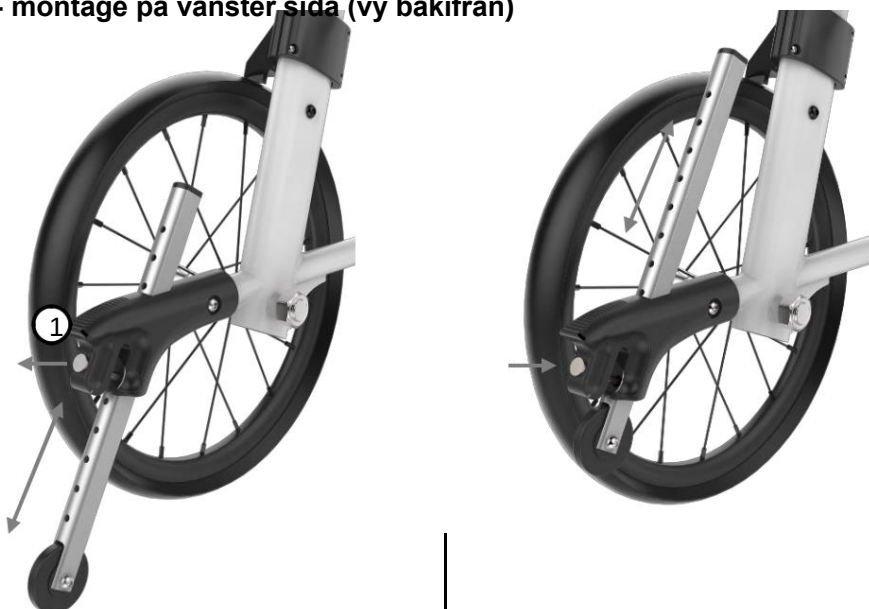

Vältskyddet är aktivt när de små hjulen placeras lågt ovanför ytan. När det sitter högt ovanför ytan är skyddet inte aktivt.

För att aktivera eller inaktivera vältskyddet, skjut ut tappen (1) och håll fast den.

Flytta vältskyddet i önskad riktning med andra handen (upp/ned)  
Släpp sedan tappen för att låsa vältskyddet i önskat läge.

Vid tekniska frågor vänligen kontakta en lokal rullstolsdistributör eller Rehasense.

Distributör:

|  |
|--|
|  |
|--|

Tillverkare

**Rehasense® Sp. z o.o.**  
Sulejowska 45 G  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Polen  
[www.rehasense.com](http://www.rehasense.com)  
[info@rehasense.com](mailto:info@rehasense.com)